

xiaomi

Інструкція з експлуатації

Електричної зубної щітки Xiaomi T302 · 1



Інструкції з техніки безпеки


При першому використанні зубної щітки це може викликати свербіж або незначну кровоточивість ясен. Це нормально, коли ясна не звикли ефективно чистити електричною зубною щіткою. Рекомендується використовувати делікатний режим, коли ваші ясна ще не звикли до нього. Зазвичай кровоточивість ясен припиняється протягом одного-двох тижнів. Припиніть користуватися зубною щіткою і зверніться до стоматолога, якщо біль зберігається.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Перед чищенням або технічним обслуговуванням приладу необхідно вийняти вилку з розетки.
- Даним приладом можуть користуватися діти у віці від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з нестачею досвіду і знань, якщо вони знаходяться під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні грати з приладом. Діти не повинні виконувати прибирання та технічне обслуговування пристрою без нагляду користувача.
- Необхідно стежити за дітьми, щоб вони не грали з приладом.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами, які не мають достатнього досвіду і знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом або проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- Не піддавайте прилад або акумулятор впливу високих температур.
- Пам'ятайте про те, що клеми приладу, що працює на батарейках, або акумуляторна батарея можуть бути закорочені металевими предметами.
- В даному приладі встановлена акумуляторна батарея, яка не підлягає заміні.
- Використовуйте і заряджайте прилад тільки при температурі від 5°C до 35°C.

Огляд продукту

Уважно прочитайте цей посібник перед використанням та збережіть його для подальшого використання.

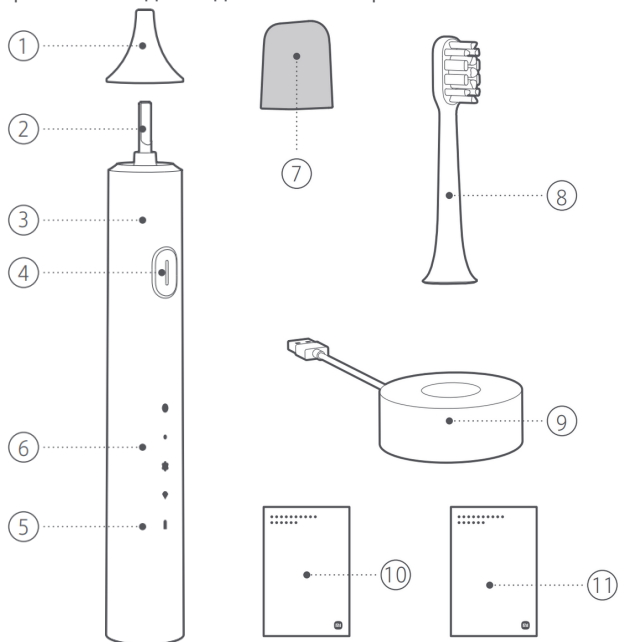


- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| ① Захисна кришка вала | ② Вал |
| ③ Ручка зубної щітки | ④ Кнопка включення / вимикання |
| ⑤ Індикатор рівня заряду батареї | ⑥ Індикатор режиму |
| ⑦ Чохол для головки зубної щітки | • Стандартне очищення |
| ⑧ Головка зубної щітки | • Делікатний і ніжний |
| ⑨ Зарядна док-станція | ◆ Масаж ясен |
| ⑩ Керівництво користувача | ◆ Відбілюючий лак |
| ⑪ Повідомлення про гарантію | |


Примітка: ілюстрації продукту, аксесуарів і користувацького інтерфейсу в керівництві користувача наведені виключно в довідкових цілях. Фактичний продукт і його функції можуть відрізнятися в зв'язку з удосконаленнями продукту.

Як використовувати

1. Переконайтеся, що головка зубної щітки встановлена в тому ж напрямку, що і передня частина ручки зубної щітки, і переконайтеся, що між головкою зубної щітки і ручкою є невеликий зазор (зазор призначений для запобігання зіткнення головки зубної щітки з ручкою під час високочастотної вібрації, щоб для отримання більшої потужності від двигуна).

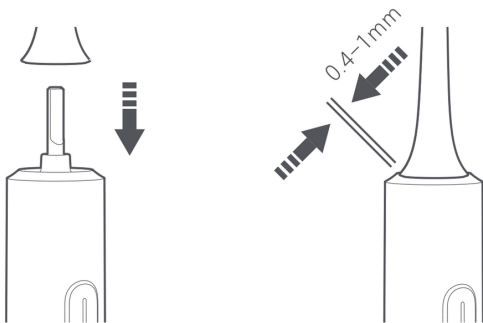

2. Намочіть головку зубної щітки і видавіть на неї необхідну кількість зубної пасти.

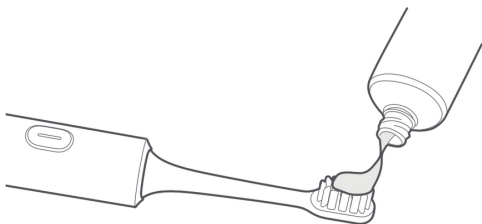

3. Включення / вимикання / зміна режимів



Включення: натисніть кнопку, щоб включити зубну щітку.

Перемикання режимів: після включення зубної щітки натисніть протягом 10 секунд, щоб переключити режими.



Пауза: натисніть кнопку на одну секунду, щоб призупинити роботу зубної щітки. Зубна щітка автоматично вимкнеться після 30-секундної паузи.

Вимкнення:

- Протягом 10 секунд після ввімкнення зубної щітки натисніть кнопку, щоб вимкнути її, коли зубна щітка перебуває в режимі відбілюючого лаку або після переходу в цей режим.
- Якщо ваша зубна щітка працює більше 10 секунд, натисніть кнопку, щоб вимкнути її в будь-якому режимі.

4. Здорова чистка зубів щіткою


- Розташуйте головку зубної щітки під кутом 45° до лінії ясен і повільно рухайте нею вздовж зубів і лінії ясен.
- Під час чищення кожні 30 секунд зубна щітка ненадовго зупиняється, щоб запропонувати користувачеві змінити положення щітки.
- Якщо під час використання не буде активної паузи, зубна щітка автоматично вимкнеться після 2-хвилинної роботи.

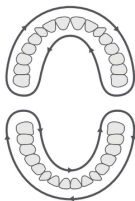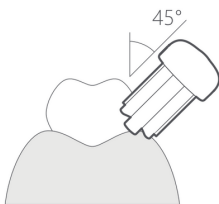

- Доступні чотири режими чищення зубів щіткою:
 - Стандартна чистка: підходить для щоденної гігієни порожнини рота
 - Делікатний і дбайливий: підходить для новачків і людей з чутливими зубами
 - Масаж ясен: підходить для людей з чутливими яснами
 - Відбілюючий лак: підходить для людей зі стійкими плямами на зубах

5. Чистка головки зубної щітки

- ① Після чищення зубів промийте головку зубної щітки проточною водою.
- ② Після промивання Головки зубної щітки надіньте чохол на головку зубної щітки, щоб голова зубної щітки була чистою та гігієнічною.

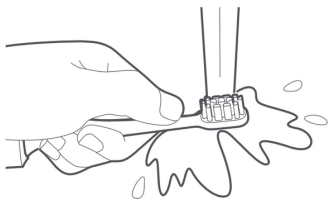

* Стоматологи рекомендують замінювати головку зубної щітки кожні три місяці.


Регулярна зарядка

- Опис індикатора рівня заряду батареї

Стан зубної щітки	Стан індикатора рівня заряду батареї	Рівень заряду батареї
Операційний	Збереження білого кольору	40%-100%
	Збереження оранжевого кольору	20%-40%
	Вдихаючи Помаранчевий в повільному темпі	10%-20%
	Дихає помаранчевим в швидкому темпі (не вдається включити)	<10%
Зарядка	Збереження білого кольору	100%
	Дихайте білим повітрям у повільному темпі	40%-100%
	Вдихаючи Помаранчевий в повільному темпі	20%-40%
	Вдихайте Помаранчевий в помірному темпі	0%-20%

- Коли індикатор рівня заряду батареї швидко загоряється помаранчевим, а зубну щітку неможливо включити, це означає, що акумулятор розряджений. Для повної зарядки акумулятора потрібно приблизно 4 години (Час зарядки залежить від заряду, що залишився). Коли акумулятор розрядиться, зубну щітку можна буде включити і виконати один сеанс чищення після двохвилинної підзарядки від спалаху.

Примітка: Док-станція для зарядки зубної щітки призначена для даної зубної щітки і несумісна з іншими продуктами.

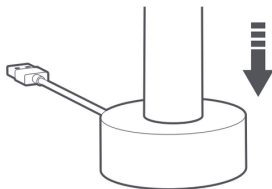

- Будь ласка, під час зарядки використовуйте адаптер живлення 5 в 1 А (продається окремо).

Захист навколишнього середовища



Коли термін служби зубної щітки закінчиться, будь ласка, вийміть, утилізуйте і повторно використовуйте вбудований акумулятор відповідно до місцевих законів і нормативних актів країни або регіону, в якому використовується даний виріб. Якщо вийняти акумулятор неможливо, утилізуйте його в суворій відповідності з правилами утилізації побутових відходів, що діють у Вашому регіоні.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ



- Не піддавайте батарею впливу вогню, щоб запобігти її вибух або виділення токсичних і небезпечних речовин.
- Не допускайте короткого замикання акумулятора, щоб він не спалахнув і не спричинив пожежу.
- Не розбирайте зубну щітку, якщо не хочете її викинути; в іншому випадку зубна щітка може бути пошкоджена.
- Перш ніж утилізувати зубну щітку, спочатку вийміть батарейку.
- Перед вийманням батареї вимкніть зубну щітку.
- Акумулятор слід безпечно утилізувати.
- Коли термін служби батареї закінчиться, прилад необхідно утилізувати належним чином.
- Перед утилізацією приладу необхідно витягти з нього акумулятор.
- При витяганні акумулятора прилад повинен бути відключений від електромережі.

Витяг акумуляторної батареї:



1. Вставте плоску викрутку в зазор між нижньою кришкою ручки і рукояткою і піднімайте її вгору до тих пір, поки нижня кришка не відкриється.

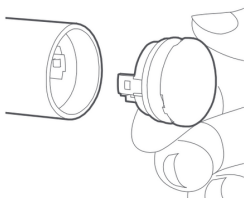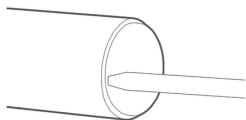

2. За допомогою плоскої викрутки натисніть на застібки з обох боків внутрішнього відділення, притисніть передній металевий стрижень до твердого предмета і виштовхніть внутрішнє відділення з зубної щітки.

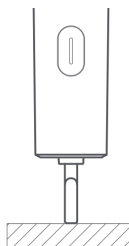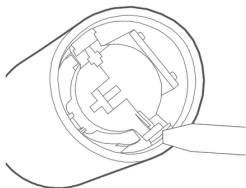

3. За допомогою діагонального різачка відріжте позитивний і негативний дроти підключення акумулятора. Вийміть акумулятор і здайте його в офіційний пункт утилізації.

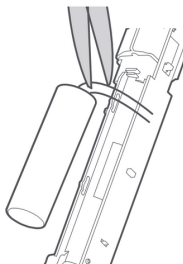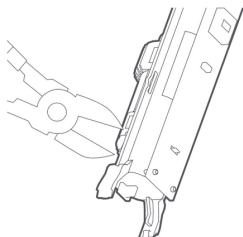

Характеристики

Назва: Електрична зубна щітка Xiaomi T302

Модель: MES608

Номінальна напруга: 3,6 В --- Номінальна потужність: 2 Вт

Клас захисту IP: IPX8 Акумулятор: 3,6 В ---, 1050 маг, 3,78 Втч

Час зарядки: прибл. 4 години

Назва: зарядна док-станція

Модель: MES608 Номінальна вхідна потужність: 5V --- 1A

Спосіб зарядки: Бездротова зарядка

Максимальна вихідна потужність: -13 дБм

Робоча частота: 110-205 кГц

Цей пристрій було протестовано і відповідає чинним обмеженням по радіочастотному (RF) впливу.

Усунення несправностей

Проблеми	Можливі причини	Рішення
Зубна щітка не включається.	Зубна щітка не може бути включена під час зарядки.	Від'єднайте зарядний кабель від зубної щітки.
	Рівень заряду батареї занадто низький.	Своєчасно заряджайте акумулятор.
Головка зубної щітки не може бути встановлена	Усередині головки зубної щітки знаходяться сторонні предмети.	Використовуйте спеціальний інструмент для видалення сторонніх предметів з Головки зубної щітки.
	На стержні є сторонні предмети.	Очистіть шахту.
	Головка зубної щітки не є оригінальним виробом.	Замініть його справжньою насадкою для зубної щітки.
Вібрація головки зубної щітки слабка.	Головка зубної щітки не встановлена на місце.	Встановіть головку зубної щітки на місце.
	Між головкою зубної щітки і ручкою знаходяться сторонні предмети.	Зніміть головку зубної щітки і видаліть сторонні предмети.