

ФАСЦІЙНИЙ МАСАЖЕР

ІНСТРУКЦІЯ



Для зручності вдосконалення продукту,
компанія залишає за собою право вносити зміни, без додаткового повідомлення!

ОПИС ТОВАРУ

ВИД ЗБОКУ



EF-2071-1



EF-2071

ВИД ЗЗАДУ



U масажна головка



T масажна головка



Конічна
масажна головка




Сферична масажна
головка 50 мм

Апарат глибокого м'язового фасціального масажу - портативний акумуляторний вібраційний апарат з великим крутним моментом і багатодіапазонним регулюванням. Він ефективно полегшує біль, викликаний накопиченням молочної кислоти після фізичних вправ. Масажер корисно використовувати людям, які ведуть сидячий образ життя.


Кількість масажних головок може бути різною і залежить від комплектації масажера.

ІНСТРУКЦІЯ

1. Оберіть масажну головку відповідно до ваших потреб та вставте її в круглий отвір в передній частині масажера.


2. Щоб увімкнути або вимкнути масажер натисніть і тримайте кнопку .

3. EF-2071:

1) Коротке натискання на кнопку  — підвищує інтенсивність, коротке натискання на кнопку “-” — знижує інтенсивність. Всього доступно 32 рівні інтенсивності.


2) Процес заряджання масажера відображається миготінням індикатору на екрані. Коли масажер повністю заряджено - на екрані відображається “99”.

EF-2071-1:

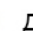1) Після запуску масажера зробіть коротке натискання на кнопку  для вибору інтенсивності. На світловому індикаторі буде відображатися поточний рівень інтенсивності. Доступно 6 рівнів інтенсивності.

2) Процес заряджання відображається миготінням індикатора. Коли масажер повністю заряджено індикатор просто горить.


3) Перед першим використання повністю зарядіть масажер.

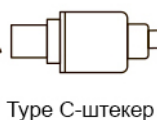

Type C-штекер



USB-штекер

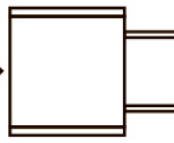

Ваш зарядний пристрій

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО БАТАРЕЇ

Коли батарея повністю розряджена її слід заряджати протягом 3 годин, після цього масажер можна використовувати протягом декількох годин. Заборонено використовувати масажер під час заряджання.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

- Глибокий масаж зменшує біль, бурсит, судоми м'язів, невралгії та інші ураження опорно-рухового апарату, викликані розтягненнями зв'язок. Майже всі хвороби м'яких тканини пов'язані з травмами, надмірним навантаження на м'язи або поганою поставою. Щоб не було надмірного стресу для організму під час використання пристрою слід уникати тривалої фізіотерапії. Слід уникати чутливих зон, таких як: голова, обличчя, шийні хребці. Якщо є запалення, набряк або біль, негайно припиніть використовувати масажер.
- Були проведені тривалі дослідження, що стосуються впливу вібрацій на певні захворювання. Використання масажера зменшить больові симптоми. В багатьох випадках інтеграція вібраційного впливу на м'язи це також рекомендація щодо фізіотерапії. Це слід робити за порадою лікаря або за його присутності.

ПОКАЗАННЯ


- » Болі і судоми внаслідок забоїв м'язів, розтягнень, розтягнень
- » Допомагає зняти набряки
- » Розслабляє сполучну тканина і фасції
- » Зменшує накопичення молочної кислоти у м'язах
- » Підвищує рухливість суглобів
- » Усуває м'язову втому



ПРОТИПОКАЗАННЯ

- » Невризми, кровотеча, застосування засобів для розрідження крові
- » Захворювання серця, використання кардіостимулятора або дефібрилятора, рак
- » Протягом 90 днів після операції по внутрішньосуглобової фіксації пристрій не можна використовувати в межах ближче ніж 10 см
- » Місця, близько до кістки, плечової кістки, тилу стопи чи руки

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

 Щоб зменшити ризик несправності, ураження електричним струмом, пожежі, смерті та пошкодження обладнання перед використанням цього продукту прочитайте інструкцію та опис цього продукту.

- Масажер не призначений для медичного використання, а лише для індивідуального масажу
- Не дозволяйте дітям використовувати масажер. Будь ласка, зберігайте його у недоступному для дітей місці
- Заборонено використовувати на вологу чи брудну поверхню шкіри. Масажер можна використовувати поверх одягу. Обережно натискайте і рухаються по шкірі масуючи кожне місце по 10 секунд
- Не використовуйте смасажну голівку на твердих частинах тіла
- Забороняється використовувати на синцях, а також при виникненні болю або дискомфорту
- Надмірне використання може спричинити перегрів виробу та скоротити термін його служби. При повторному використанні, масажеру необхідно дати трохи охолонути
- Не використовуйте масажер у вологому середовищі, наприклад у ванній кімнаті. Не занурюйте його у воду або інші рідин, щоб уникнути короткого замикання або ураження електричним струмом
- Не залишайте масажер біля плити або під прямими сонячними променями
- Не використовуйте під час грози
- Не вставляйте сторонні предмети в будь-які отвори масажеру
- Не накривайте масажер під час використання, щоб уникнути несправності через збільшення температури двигуна
- Уникайте контакту з задньою частиною вібраційної головки, оскільки її можна пошкодити

ДОГЛЯД

1. Протріть поверхню пристрою злегка вологим рушником і висушіть м'якою тканиною.
2. Якщо ви зберігаєте масажер протягом тривалого часу або берете з собою, помістіть його в оригінальну коробку. Зберігайте у сухому місці.



УВАГА

- Не кидайте та не вдаряйте зарядний пристрій (адаптер). Якщо корпус зарядного пристрою (адаптера) пошкоджено, зверніться до авторизованого сервісного центру для заміни.
- Не торкайтеся шнура живлення мокрими руками. Заборонено витягувати зарядний пристрій тримаючись за кабель.
- Не торкайтеся масажера або зарядного пристрою (адаптера) мокрими руками щоб уникнути короткого замикання, несправності або ураження електричним струмом.
- Якщо зарядний пристрій намок, припиніть його використання та зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Якщо у вас є серцеві захворювання, розтягнення м'язів, переломи, остеопороз, захворювання суглобів, злоякісні пухлини, травматичну шкіру або екзему - перед використанням проконсультуйтеся з лікарем.
- Не піддавайте батарею впливу високих температур або обладнання, що виділяє тепло, наприклад обігрівачів, мікрохвильових печей, духовок або водонагрівачів. Уникайте прямих сонячних променів. Перегріта батарея може спричинити вибух.
- Не розбирайте та не замінюйте батарею, не вставляйте сторонні предмети, не занурюйте у воду чи інші рідини, щоб пошкодження приладу, перегріву, пожежі чи вибуху.
- Акумулятор необхідно вийняти з приладу, перш ніж його викинути.
- Перед виймання батареї прилад повинен бути вимкнений.
- Батарею слід безпечно утилізувати

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Назва: Фасційни масажер

Номер: EF-2071

Напруга зарядки: 5 В

Напруга акумулятора: 7,4 В

Номінальна потужність: 24 Вт