


Масажер мікротоковий Xiaomi SKG

Інструкція з експлуатації

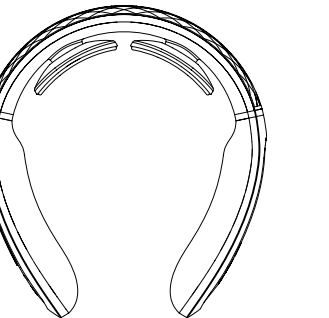

Модель 4356E

Дякуємо за те що придбали продукт SKG.
Перед використанням виробу, будь ласка, прочитайте цей посібник та збережіть його для подальшого використання.

Дякуємо, що придбали наш розумний масажер для шиї. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням, щоб правильно використовувати виріб та повністю зрозуміти як він працює. Ми сподіваємося, що цей виріб принесе комфорт у ваше життя та покращить його.

Зберігайте цей посібник для подальшого використання. Якщо під час використання продукту виникають будь-які проблеми, будь ласка, зв'яжіться з нами. Ми будемо раді вам допомогти. Дякуємо вам!

Цей виріб – побутовий, не використовуйте його в комерційних цілях. Оскільки ми постійно вдосконалюємо свою продукцію, ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни без попереднього повідомлення.

Запобіжні заходи

⚠ **Небезпечно!**

- Ніколи не використовуйте виріб паралельно з такими медичними та іншими електронними пристроями як:
 - Кардіостимулятори та інші імплантовані медичні електронні вироби;
 - Штучне серце та легені та інші медичні електронні пристрої, що підтримують життя;
 - Електрокардіографи та інші медичні електронні прилади:
 - * Використання виробу паралельно з медичними електронним пристроями може спричинити пошкодження електричних виробів та ризику життю.
 - Заборонено використовувати виріб біля/в АЗС, майстернях з високою концентрацією пилу або газу та інших зонах з легкозаймистими та вибухонебезпечними матеріалами.

⚠ **Увага!**

- Якщо у користувача є високочастотний хірургічний пристрій на тілі, електрод виробу може спричинити опіки та пошкодження виробу.
- Якщо виріб використовується поблизу (1М) приладу для короткохвильової або мікрохвильової терапії, робота виробу може бути нестабільною.
- Електрод не повинен контактувати з ранами та рубцями під час використання.
- Використовуючи виріб, не кладіть електрод біля серця або на грудну клітину.
- Виріб розраховано на використання одним користувачем. Коли його використовують декілька користувачів, перед його використанням виріб слід ретельно очистити.
- Коли ви використовуєте виріб, щільно та рівномірно наклеюйте електрод на шкіру.
- Електрод цього виробу має функцію генерування тепла. Якщо функція генерування тепла застосовується до однієї і тієї ж частини протягом тривалого часу (більше 15 хвилин), це може спричинити

- низькотемпературний опік.
- Якщо під час або після використання вам стало погано, припиніть використання та зверніться за медичною допомогою.
- Цей виріб містить літєву батарею. Не розбирайте, не модифікуйте, не кидайте у вогонь та уникайте потрапляння рідини у виріб, інакше це може призвести до пошкодження та вибуху виробу.
- У наступних випадках перед використанням проконсультуйтеся з лікарем, інакше це може спричинити нещасний випадок або фізичний дискомфорт.
 - Особи, які перебувають на лікуванні та відчувають дискомфорт.
 - Особи з серцевими та неврологічними захворюваннями.
 - Особи, температура тіла яких перевищує 38 градусів (період лихоманки).
 - Особи, хворі на інфекційні захворювання.
 - Особи з хворобами шкіри або у яких пошкоджена шкіра.
 - Особи, які приймають ліки.
 - Особи з порушенням артеріального тиску.
 - Особи, які не можуть висловлювати свої відчуття та побажання.
 - Особи з порушеннями відчуття через високі порушення периферичного кровообігу, такі як діабет.
 - Особи з алергічною реакцією на електроди з нержавіючої сталі.
- Забороняється використання за таких умов:
 - Наявність злоякісних пухлин
 - Особи зі схильністю до кровотеч
 - Вагітні жінки, що знаходяться на зберіганні
 - Особи з гострими гнійними запаленнями
 - Особи зі кардіостимулятором серця
 - Особи з металевим імплантатом
 - Використовувати виріб поблизу серця
- Не використовуйте виріб поблизу серця, над шиєю, головою, ротом, статевими органами або ділянок зі захворюваннями шкіри та не використовуйте виріб на підшвах ніг. Крім того, не стискайте внутрішні органи під час використання виробу.
- Не використовуйте з іншими медичними пристроями або не використовуйте два виробу одночасно.

- Не використовуйте для інших цілей, крім тих, що описані в посібнику користувача.
- Не використовуйте електрод з пошкодженою поверхнею або якщо на ній є тріщини.
- Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте цей виріб самостійно.

⚠ **Примітка!**

- Якщо вам стало погано через не нормальну роботу цього виробу, негайно припиніть його використання.
- Якщо під час використання у вас з'являються дивні відчуття в тілі чи на шкірі, проконсультуйтеся з лікарем і дотримуйтеся порад лікаря.
- Якщо ви хочете перемістити виріб або передати його іншій особі під час масажу, перед переміщенням обов'язково вимкніть живлення.
- Не використовуйте виріб паралельно з іншими електронними пристроями (наприклад з електронним годинником).
- Якщо під час використання виробу ви спостерігаєте не нормальну роботу, негайно вимкніть виріб та від'єднайте від джерела живлення.
- Не з'єднуйте та не від'єднуйте USB-кабель живлення мокрими руками.
- Не використовуйте виріб на дітях або людях, котрі не можуть чітко висловлювати свої відчуття.
- Не використовуйте виріб в місцях з високим рівнем вологості, наприклад у ванній, або під час купання.
- Не використовуйте виріб під час сну, інакше це може призвести до пошкодження виробу. Крім того виріб може посунутися, що спричинить дискомфорт.
- Не використовуйте виріб під час керування автомобілем, інакше це може спричинити фізичний дискомфорт через надмірну стимуляцію, що в свою чергу може призвести до аварії. Не тримайте електрод на пошкодженій ділянці тіла протягом тривалого часу, бо це може спричинити опік шкіри.
- Під час масажу уникайте контакту електрода з металевими предметами, такими як, пряжки ременів, намисто тощо, в іншому

- випадку ви можете отримати сильний удар струмом.
- Не залишайте виріб на одному місці протягом тривалого часу (більше 30 хвилин), бо це може призвести до втоми м'язів та фізичного дискомфорту на ділянці, де проводився масаж.
- Будь ласка, розміщуйте цей виріб правильно і використовуйте його на шийному відділі хребта. Розміщуйте виріб симетрично, бо в іншому випадку при неправильному розміщенні виробу може статися нещасний випадок, або користувач може відчувати дискомфорт.
- Від'єднуючи зарядний кабель USB від корпусу, не тягніть за кабель, а тримайтеся за вилку.
- Електрод продукту має функцію поверхневого нагрівання для користувачів, які не чутливі до тепла або схильні до алергії на тепло.
- Коли виріб працює тривалий час, поверхня його буде нагріватися, що є нормальним явищем.

⚠ **Поради!**


- Переконайтеся, що кнопка на корпусі виробу працює належним чином.
- Коли ви використовуєте виріб вперше або якщо акумулятор розрядився після тривалого зберігання виробу, зарядіть виріб відповідно інструкцій, зазначених у посібнику користувача, щоб переконатися, що виріб може працювати нормально.
- Утилізувати цей виріб необхідно відповідно до відповідних норм щодо охорони навколишнього середовища, інакше неправильна утилізація може спричинити забруднення навколишнього середовища.
- Рекомендується використовувати особам віком від 16 років.
- Не використовуйте та не зберігайте цей виріб у наступних місцях:
 - Місця в які потрапляють прямі сонячні промені
 - Місця з високою температурою та вологістю
 - Місця поблизу води та рідин
 - Місця з високою концентрацією пилу
 - Місця поблизу вибухонебезпечних речовин, або місця з сильною вібрацією
 - Місця з сильним електромагнітним полем

Технічні параметри


Модель	4088	Номер товару	33856
Код товару	1105050015	Номінальна напруга	5В---
Номінальна потужність	5Вт	Ємність акумулятору	1000 мАгод
Виконавчий стандарт	IEC60335-1		

Модель	4356	Номер товару	33856
Код товару	1105070024	Номінальна напруга	5В---
Номінальна потужність	5Вт	Ємність акумулятору	1000 мАгод
Виконавчий стандарт	IEC60335-1		

Електрична схема

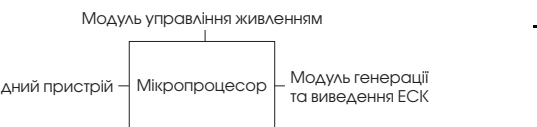


Опис продукту

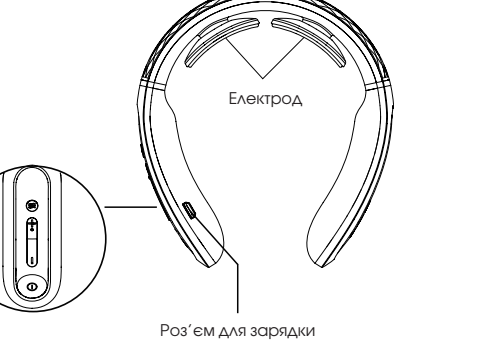

- ① Кнопка I/O / переключення режиму
-))) Кнопка I/O підігріву
- + (Натискання) Кнопка збільшення потужності (Затискання) Ввімкнення голосової функції
- (Натискання) Кнопка зменшення потужності (Затискання) Вимкнення голосової функції



Метод розміщення виробу

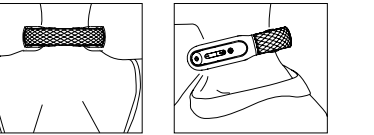

Використання виробу

- Якщо акумулятор виробу розряджений, індикатор живлення почне блимати жовтим світлом та буде лунати звуковий сигнал. Ви можете підключити USB-кабель до адаптера живлення (діапазон потужності: 5 В, 1-2А), який відповідає сучасним стандартам для побутової техніки, або ви можете підключити USB-кабель до інтерфейсу комп'ютера для заряджання. Під час заряджання кнопка живлення буде блимати жовтим світлом, а коли акумулятор повністю буде зарядженим, індикатор буде горіти синім світлом. Для повної зарядки потрібно чотири години, а кожна повна зарядка акумулятору може забезпечити 3-4 години безперервної роботи.
- Перед використанням спочатку змочіть шкіру на шиї мокрим рушником, а потім розмістіть виріб на шиї та встановіть електрод поруч з шийним відділом хребта, відрегулюйте положення виробу, увімкніть виріб, відрегулюйте потужність та оберіть режим масажу.
- Затисніть на виробі кнопку ① протягом двох секунд, щоб увімкнути виріб (повинна пролунати голосова підказка, звичайний режим буде встановлений за замовчуванням).
- Під час ввімкнення виробу за замовчуванням буде встановлений звичайний режим. Натисніть кнопку ①, щоб переключити режим. Є три режими. Після кожного натискання на кнопку пролунає звуковий сигнал і виріб перейде на наступний режим. Три режими можна перемикаати циклічно (Примітка: звичайний режим, режим

релаксації, режим вправ). Щоразу при перемиканні режиму потужність повертається до рівня 0 за замовчуванням. Затисніть кнопку **0** протягом двох секунд, пролунає голосова підказка та виріб вимкнеться

5. Кнопка з позначкою «+» призначена для збільшення потужності. Після кожного натискання на кнопку пролунає голосова підказка і виріб перейде на наступний рівень потужності. Всього існує 15 рівнів потужності (0, 1, 2 ... 15), коли ви дійдете до рівня 14, то під час натискання на кнопку ви почуєте голосову підказу, що наступний рівень – це максимальний рівень потужності. Затисніть кнопку «+», щоб ввімкнути голосову функцію

6. Кнопка з позначкою «-» призначена для зменшення потужності. Після кожного натискання на кнопку пролунає голосова підказка і виріб перейде на попередній рівень потужності. Всього 15 рівнів потужності (0, 1, 2 ... 15), коли ви дійдете до рівня 1, то під час натискання на кнопку ви почуєте голосову підказу, що наступний рівень – це мінімальний рівень потужності. Затисніть кнопку «-», щоб вимкнути голосову функцію та перейти в беззвуковий режим.

7. Кнопка з позначкою для ввімкнення/вимкнення підігріву. Натисніть кнопку підігріву, ви почуєте голосову підказку та функція почне працювати. Два електроди нагріються до температури 37 ~ 43°C. Натисніть ще раз на кнопку, щоб вимкнути функцію, при натисканні ви почуєте голосову підказку.

8. Розрахований сеанс масажу - 15 хвилин, виріб автоматично вимкнеться через 15 хвилин та пролунає голосова підказка. Виріб автоматично вимкнеться та пролунає голосова підказка через 30 ± 10 секунд, якщо він не правильно розміщений або не використовується. Якщо ви вимкнули виріб, та не обрали функцію підігріву чи режим масажу виріб автоматично вимкнеться та пролунає голосова підказка через 30 ± 10 секунд.

9. Коли заряд акумулятору занадто низький, виріб автоматично вимкнеться, та пролунає голосова підказка.

Поради

- Виріб автоматично вимикається після 15 хвилин роботи.
- Рекомендується використовувати виріб не більше 30 хвилин на день.
- Продукт слід зберігати в сухому і провітрюваному місці після використання.
- Не кладіть на виріб важкі предмети.

Щоденне обслуговування

- Під час чищення та обслуговування цього виробу його треба вимкнути. Використовуйте вологий паперовий рушник для чищення електрода, якщо він дуже брудний, додайте трохи медичного спирту (концентрація спирту 75%) для протирання та дезінфекції.
- Використовуйте нейтральні миючі засоби та м'яку ганчірку для щоденного обслуговування, не використовуйте агресивні миючий засіб та не кладіть виріб у воду для замочування або миття.
- У процесі очищення не допускайте потрапляння води та інших рідин в середину виробу, щоб уникнути короткого замикання та ураження електричним струмом під час використання.

Поширені запитання

- Якщо у вас виникають проблеми при використанні продукту, зверніться до наступних порад та рішень.
- Якщо під час використання проблема залишилась або виріб неможливо використовувати, вимкніть живлення.
- Користувачі не повинні самостійно розбирати або ремонтувати виріб. Самостійне розбирання або ремонт можуть спричинити пошкодження виробу та анулюють вашу гарантію на виріб. Компанія не несе відповідальності за будь-які наслідки, спричинені такими діями.

Проблеми	Можлива причина / метод усунення
Виріб не вмикається	- Акумулятор розряджений - Будь ласка, підтвердьте, чи натиснута кнопка на корпусі виробу.
Помилка зарядки або відсутність індикатора заряду	Перевірте чи правильно підключений USB кабель до виробу та адаптеру живлення.
Виріб вмикається, але не відчувається ефект масажу	- Перевірте чи контактує виріб безпосередньо зі шкірою? Відрегулюйте положення так, щоб виріб був встановлений близько до шкіри. - Перевірте чи є між подушечками та шкірою волосся чи одяг, прикраси тощо? Якщо зайві предмети присутні – прибери́ть їх.
Присутнє відчуття поколювання	- Перевірте чи тісно контактують електрод масажера та шкіра шиї? Відрегулюйте положення так, щоб шкіра не прилипала до виробу, але виріб щільно прилягав до шкіри. - Перевірте час масажу? Рекомендується проводити сеанс масажу - 15 хвилин, двічі на день. - Перевірте яка встановлена потужність? Необхідно зменшити потужність. - Перевірте чи не з'явилась алергічна реакція на електрод? Якщо є алергічна реакція, слід звернутися до лікаря. - Перевірте чи не занадто шкіра суха? За допомогою вологого рушника змочіть шкіру і використовуйте її. - Перевірте чи є на шкірі рана? Не розміщуйте електроди на рану під час масажу.
Слабкий ефект масажу	- Перевірте чи тісно контактують електрод масажера та шкіра шиї? Відрегулюйте положення так, щоб шкіра не прилипала до виробу, та оберіть більший рівень потужності. - Перевірте чи не забруднена поверхня електроду? - Перевірте заряд акумулятора? За необхідності зарядіть виріб.

Дії при виявленні несправності/пошкодження: припиніть використувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.

Правила та умови ефективного і безпечного використання та зберігання товару:

- сухе, чисте, вентильоване приміщення;
- відстань від опалювальних пристроїв - від 1 м;
- температура повітря від -15°C до + 40°C;
- відносна вологість повітря 60-65%;
- не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню;
- не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз'ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції;

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання

 Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів. Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Увага!

Пристрої, які оснащені літій-іонною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати, здавлювати, проколювати, занурювати в воду або вогонь, піддавати дії температур вище 60°C за для уникнення завдання шкоди здоров'ю та навколишньому середовищу. Несправну літій-іонну батарею необхідно утилізувати відповідно до місцевих норм.

Гарантійний талон

Дата продажу: _____

Найменування виробу: _____

IMEI/SN: _____

Підпис продавця/М.П.: _____

Найменування та адреса торговельної організації: _____

ПІБ/підпис клієнта: _____
