


Масажер мікротоковий

Xiaomi SKG

Інструкція з експлуатації

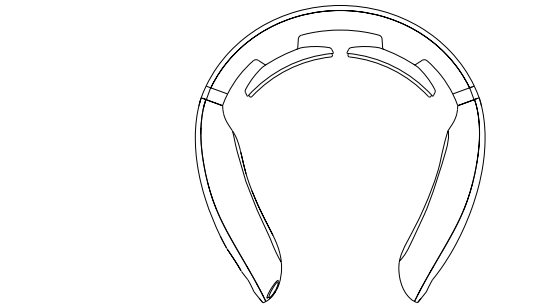

Модель 4098E

Дякуємо за те що придбали продукт SKG.
Перед використанням виробу, будь ласка, прочитайте цей посібник та збережіть його для подальшого використання.

Дякуємо, що придбали наш розумний масажер для шиї. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням, щоб правильно використовувати виріб та повністю зрозуміти як він працює. Ми сподіваємося, що цей виріб принесе комфорт у ваше життя та покращить його.

Зберігайте цей посібник для подальшого використання. Якщо під час використання продукту виникають будь-які проблеми, будь ласка, зв'яжіться з нами. Ми будемо раді вам допомогти. Дякуємо вам!

Цей виріб – побутовий, не використовуйте його в комерційних цілях. Оскільки ми постійно вдосконалюємо свою продукцію, ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни без попереднього повідомлення.

Запобіжні заходи

⚠ **Небезпечно!**

- Ніколи не використовуйте виріб паралельно з такими медичними та іншими електронними пристроями як:
 - Кардіостимулятори та інші імплантовані медичні електронні вироби;
 - Штучне серце та легені та інші медичні електронні пристрої, що підтримують життя;
 - Електрокардіографи та інші медичні електронні прилади;
 - Заборонено використовувати виріб біля/в АЗС, майстернях з високою концентрацією пилу або газу та інших зонах з легкозаймистими та вибухонебезпечними матеріалами.

⚠ **Увага!**

- Якщо у користувача є високочастотний хірургічний пристрій на тілі, електрод виробу може спричинити опіки та пошкодження виробу.
- Якщо виріб використовується поблизу (1М) приладу для короткохвильової або мікрохвильової терапії, робота виробу може бути нестабільною.
- Електрод не повинен контактувати з ранами та рубцями під час використання.
- Використовуючи виріб, не кладіть електрод біля серця або на грудну клітину.
- Виріб розраховано на використання одним користувачем. Коли його використовують декілька користувачів, перед його використанням виріб слід ретельно очистити.
- Коли ви використовуєте виріб, щільно та рівномірно наклеюйте електрод на шкіру.
- Електрод цього виробу має функцію генерування тепла. Якщо функція генерування тепла застосовується до однієї і тієї ж частини протягом тривалого часу (більше 15 хвилин), це може спричинити низькотемпературний опік.
- Якщо під час або після використання вам стало погано, припиніть використання та зверніться за медичною допомогою.

- Цей виріб містить літєву батарею. Не розбирайте, не модифікуйте, не кидайте у вогонь та уникайте потрапляння рідини у виріб, інакше це може призвести до пошкодження та вибуху виробу.
- У наступних випадках перед використанням проконсультуйтеся з лікарем, інакше це може спричинити нещасний випадок або фізичний дискомфорт.
 - Особи, які перебувають на лікуванні та відчувають дискомфорт.
 - Особи з серцевими та неврологічними захворюваннями.
 - Особи, температура тіла яких перевищує 38 градусів (період лихоманки).
 - Особи, хворі на інфекційні захворювання.
 - Особи з хворобами шкіри або у яких пошкоджена шкіра.
 - Особи, які приймають ліки.
 - Особи з порушенням артеріального тиску.
 - Особи, які не можуть висловлювати свої відчуття та побажання.
 - Особи з порушеннями відчуття через високі порушення периферичного кровообігу, такі як діабет.
 - Особи з алергічною реакцією на електроди з нержавіючої сталі.
- Забороняється використання за таких умов:
 - Наявність злоякісних пухлин
 - Особи зі схильністю до кровотеч
 - Вагітні жінки, що знаходяться на зберіганні
 - Особи з гострими гнійними запаленнями
 - Особи зі кардіостимулятором серця
 - Особи з металевим імплантатом
 - Використовувати виріб поблизу серця
- Не використовуйте виріб поблизу серця, над шиєю, головою, ротом, статевими органами або ділянок зі захворюваннями шкіри та не використовуйте виріб на підшвах ніг. Крім того, не стискайте внутрішні органи під час використання виробу.
- Не використовуйте з іншими медичними пристроями або не використовуйте два виробу одночасно.
- Не використовуйте для інших цілей, крім тих, що описані в посібнику користувача.
- Не використовуйте електрод з пошкодженою поверхнею або якщо

- на ній є тріщини.
- Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте цей виріб самостійно.

⚠ **Примітка!**

- Якщо вам стало погано через не нормальну роботу цього виробу, негайно припиніть його використання.
- Якщо під час використання у вас з'являються дивні відчуття в тілі чи на шкірі, проконсультуйтеся з лікарем і дотримуйтесь порад лікаря.
- Якщо ви хочете перемістити виріб або передати його іншій особі під час масажу, перед переміщенням обов'язково вимкніть живлення.
- Не використовуйте виріб паралельно з іншими електронними пристроями.
- Якщо під час використання виробу ви спостерігаєте не нормальну роботу, негайно вимкніть виріб та від'єднайте від джерела живлення.
- Не з'єднуйте та не від'єднуйте USB-кабель для живлення мокримися руками.
- Не використовуйте виріб на дітях або людях, котрі не можуть чітко висловлювати свої відчуття.
- Не використовуйте виріб в місцях з високим рівнем вологості, наприклад у ванній, або під час купання.
- Не використовуйте виріб під час сну.
- Не тримайте електрод на пошкодженій ділянці тіла протягом тривалого часу.
- Під час масажу уникайте контакту електрода з металевими предметами, такими як, пряжки ременів, намисто тощо.
- Не залишайте виріб на одному місці протягом тривалого часу (більше 30 хвилин).
- Будь ласка, розміщуйте цей виріб правильно і використовуйте його на шийному відділі хребта.
- Від'єднуючи зарядний кабель USB від корпусу, не тягніть за кабель, а тримайтеся за вилку.
- Електрод продукту має функцію поверхневого нагрівання для користувачів, які не чутливі до тепла або схильні до алергії на тепло.

- Будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням.
- Коли виріб працює тривалий час, поверхня його буде нагріватися, що є нормальним явищем.
- Коли ви використовуєте батарею пульта дистанційного керування триває тривалий час (більше 3 місяців), її треба замінити.
- Коли батарея пульта дистанційного керування розрядиться, якомога швидше замініть її новою батареєю тієї ж моделі. Модель батареї: CR2032.
- Замінюючи батарею пульта дистанційного керування, зверніть увагу, щоб правильно її встановити (правильне розміщення полюсів).
- Після того, як батарея пульта дистанційного керування розрядиться, замініть її на нову та утилізуйте стару відповідно до відповідних правил у вашому місці проживання.

⚠ **Поради!**


- Переконайтеся, що кнопка на корпусі виробу працює належним чином.
- Коли ви використовуєте виріб вперше або якщо акумулятор розрядився після тривалого зберігання виробу, зарядіть виріб відповідно інструкцій, зазначених у посібнику користувача, щоб переконатися, що виріб може працювати нормально.
- Утилізувати цей виріб необхідно відповідно до відповідних норм щодо охорони навколишнього середовища, інакше неправильна утилізація може спричинити забруднення навколишнього середовища.
- Рекомендується використовувати особам віком від 16 років.
- Не використовуйте та не зберігайте цей виріб у наступних місцях:
 - Місця в які потрапляють прямі сонячні промені
 - Місця з високою температурою та вологістю
 - Місця поблизу води та рідин
 - Місця з високою концентрацією пилу
 - Місця поблизу вибухонебезпечних речовин, або місця з сильною вібрацією
 - Місця з сильним електромагнітним полем

Технічні параметри


Модель	4098	Номінальна напруга	5В ---
Номінальна потужність	5Вт	Стандарт	GB4706.1-2005

Модель	4353	Номінальна напруга	5В ---
Номінальна потужність	5Вт	Стандарт	GB4706.1-2005


Опис продукту

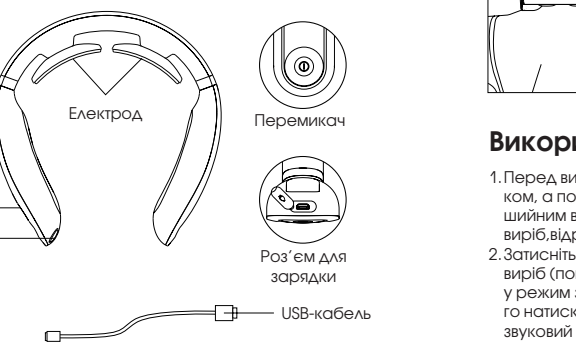

Пульт дистанційного керування

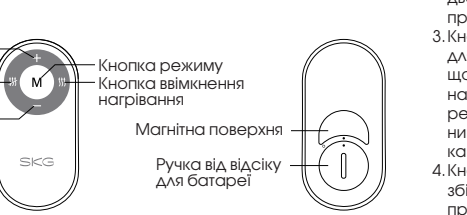

Метод розміщення виробу

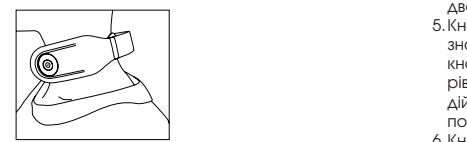

Використання виробу

- Перед використанням спочатку змочіть шкіру на шиї мокрим рушником, а потім розмістіть виріб на шиї та встановіть електрод поруч з шийним відділом хребта, відрегулюйте положення виробу, увімкніть виріб, відрегулюйте потужність та оберіть режим масажу.
- Затисніть на виробі кнопку **ⓘ** протягом двох секунд, щоб увімкнути виріб (повинен пролунати звуковий сигнал). Виріб відразу перейде у режим з потужністю за замовчуванням (0). Під час повторного натискання кнопки, рівень потужності зростає та ви почуєте звуковий сигнал. Всього існує 15 рівнів потужності, коли ви дійдете

- до максимального рівня, під час натискання на кнопку ви почуєте два звукових сигнали. Затисніть кнопку **ⓘ** протягом двох секунд, пролунають два звукові сигнали та виріб вимкнеться.
- Кнопка з позначкою «М» на пульті дистанційного керування слугує для перемикання режимів. Натисніть кнопку перемикання режимів, щоб переключити режим. Є три режими. Після кожного натискання на кнопку пролунає звуковий сигнал і виріб перейде на наступний режим. Три режими можна перемикати циклічно (Примітка: звичайний режим, режим релаксації, режим вправ). Щоразу при перемиканні режиму потужність повертається до рівня 0 за замовчуванням.
- Кнопка з позначкою «+» на пульті дистанційного керування для збільшення потужності. Після кожного натискання на кнопку пролунає звуковий сигнал і виріб перейде на наступний рівень потужності. Всього 15 рівнів потужності (0,1,2 ... 15), коли ви дійдете до максимального рівня, то при натисканні на кнопку «+» ви почуєте два звукових сигнали.
- Кнопка з позначкою «-» на пульті дистанційного керування призначена для зменшення потужності. Після кожного натискання на кнопку пролунає звуковий сигнал і виріб перейде на попередній рівень потужності. Всього 15 рівнів потужності (0,1,2 ... 15), коли ви дійдете до мінімального рівня, то під час натискання на кнопку ви почуєте два звукових сигнали.
- Кнопка з позначкою **⏻** на пульті дистанційного керування для вимкнення підігріву. Натисніть кнопку підігріву, ви почуєте звуковий сигнал та функція почне працювати. Два електроди нагріються до температури 37 ~ 43°C.
- Кнопка з позначкою **⏻** на пульті дистанційного керування для вимкнення підігріву. Натисніть кнопку, ви почуєте два звукових сигнали та функція вимкнеться.
- Розрахований сеанс масажу - 15 хвилин, виріб автоматично вимкнеться через 15 хвилин.
- Виріб автоматично вимкнеться через 30 секунд, якщо він не працює.

Інструкції щодо заряджання
1. 1. Коли акумулятор розряджений, кнопка живлення світиться помаранчевим кольором. Під'єднайте один кінець кабелю Micro-USB до виробу а інший до адаптеру живлення (вихід 5V1A / 2A), щоб зарядити виріб. Під час заряджання буде блимати помаранчевий індикатор. Коли виріб повністю зарядиться, індикатор буде блимати білим кольором.
2. 2. Коли батарею пульт дистанційного керування потрібно замінити, відкрийте відсік для батареї (можна використати монетку). Поверніть ручку проти годинникової стрілки, щоб відкрити відсік. Будьте уважними при встановленні батарейки, її потрібно вставити відповідним чином. (Модель акумулятора: CR2032)

- Поради**
- Виріб автоматично вимикається після 15 хвилин роботи.
 - Рекомендується використовувати виріб не більше 30 хвилин на день.
 - Продукт слід зберігати в сухому і провітрюваному місці після використання.
 - Не кладіть на виріб важкі предмети.
 - Не тягніть за гумову заглушку на зарядному роз'ємі USB, оскільки вона може відірватися і виріб впаде.

Щоденне обслуговування

- Під час чищення та обслуговування цього виробу його треба вимкнути. Використовуйте вологий паперовий рушник для чищення електрода, якщо він дуже брудний, додайте трохи медичного спирту (концентрація спирту 75%) для протирання та дезінфекції.
- Використовуйте нейтральні миючі засоби та м'яку ганчірку для щоденного обслуговування, не використовуйте агресивні миючий засіб та не кладіть виріб у воду для замочування або миття.
- У процесі очищення не допускайте потрапляння води та інших рідин в середину виробу, щоб уникнути короткого замикання та ураження електричним струмом під час використання.

Поширені запитання

- Якщо у вас виникають проблеми при використанні продукту, зверніться до наступних порад та рішень.
- Якщо під час використання проблема залишилась або виріб неможливо використовувати, вимкніть живлення.
- Користувачі не повинні самостійно розбирати або ремонтувати виріб. Самостійне розбирання або ремонт можуть спричинити пошкодження виробу та анулюють вашу гарантію на виріб. Компанія не несе відповідальності за будь-які наслідки, спричинені такими діями.

Проблеми	Можлива причина / метод усунення
Виріб не вмикається	• Акумулятор розряджений • Батарейка пульту дистанційного керування розряджена. • Будь ласка, підтвердьте, чи натиснута кнопка на корпусі виробу.
Помилка зарядки або відсутність індикатора заряду	Перевірте чи правильно підключений USB кабель до виробу та адаптеру живлення.
Виріб вмикається, але не відчувається ефект масажу	• Перевірте чи контактує виріб безпосередньо зі шкірою? Відрегулюйте положення так, щоб виріб був встановлений близько до шкіри. • Перевірте чи є між подушечками та шкірою волосся чи одяг, прикраси тощо? Якщо зайві предмети присутні – приберіть їх. • Перевірте яка встановлена потужність? Збільште потужність.

Присутнє відчуття поколювання	• Перевірте чи тісно контактують електрод масажера та шкіра шиї? Відрегулюйте положення так, щоб шкіра не прилипала до виробу. • Перевірте час масажу? Рекомендується проводити сеанс масажу - 15 хвилин, двічі на день. • Перевірте яка встановлена потужність? Необхідно зменшити потужність. • Перевірте чи не з'явилась алергічна реакція на електрод? Якщо є алергічна реакція, слід звернутися до лікаря. • Перевірте чи не занадто шкіра суха? За допомогою вологого рушника змочіть шкіру і використовуйте її. • Перевірте чи є на шкірі рана? Не розміщуйте електроди на рану під час масажу.
Слабкий ефект масажу	• Перевірте чи тісно контактують електрод масажера та шкіра шиї? Відрегулюйте положення так, щоб шкіра не прилипала до виробу, та оберіть більший рівень потужності. • Перевірте чи не забруднена поверхня електроду? Очистіть поверхню електрода. • Перевірте заряд акумулятора? За необхідності зарядіть виріб. • Перевірте яка встановлена потужність? Збільште потужність.

Дії при виявленні несправності/пошкодженні: припиніть використувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.

Правила та умови ефективного і безпечного використання та зберігання товару:

- сухе, чисте, вентильоване приміщення;
- відстань від опалювальних пристроїв - від 1 м;
- температура повітря від -15°C до + 40°C;
- відносна вологість повітря 60-65%;
- не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню;
- не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз'ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції;

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання

 Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів. Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Увага!

Пристрої, які оснащено літій-іонною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати, здавлювати, проколювати, занурювати в воду або вогонь, піддавати дії температур вище 60°C за для уникнення завдання шкоди здоров'ю та навколишньому середовищу. Несправну літій-іонну батарею необхідно утилізувати відповідно до місцевих норм.

Гарантійний талон

Дата продажу: _____
Найменування виробу: _____
IMEI/SN: _____
Підпис продавця/М.П.: _____
Найменування та адреса торговельної організації: _____
ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недовліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбінатора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця _____

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця _____

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця _____

Доповнення до інструкції по експлуатації

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності вірно заповненого талону.

1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.

1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типівосновних пристроїв — Зроки.

1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий)зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.

1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запоби-

ганняможливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).

1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього.

1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

2.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):

- будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
- попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
- експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вістом пилу;
- неправильна установка і підключення товару;
- ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схематехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не повноваженимиособами;
- відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж і інших подібних зовнішніхфакторів.

2.2 Дії непереборної сили(стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРНТІЙНІІХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації

або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.

3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури,носії інформації різних типів, чохли, ремені, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.

3.3 Якщо дефект виник внаслідок природнього зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.

3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

4.1 Будь-які механічні пошкодження,що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).

4.2 Ушкодження, спричинені недбалим, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.

4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставленні або рекомендовані виробником

4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.

4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303

4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (вт.ч. електронні).

Авторизовані сервісні центри в Україні



ТОВ «РОБИМ ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ТЦ «Олімпійський»)
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
robingood.com.ua



ТОВ «Gratis, ЛТД»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(066) 272-15-25
(067) 272-15-25
код ЄДРПОУ 23159341
gratis.com.ua



ТОВ «КРОК-ТТЦ»
02000, м. Київ, вул. Райдужна, 25-Б
0 800-504-504
0 800-211-501
0 800-211-499
код ЄДРПОУ 36940600
kroc-ttc.com